



# AURA BULK FILL

UNIVERSAL BULK FILL COMPOSITE

## INSTRUCTIONS FOR USE



PAK413328F.D




Made in Australia by SDI Limited  
3-15 Brunson Street  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia

Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 0225 5734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 0225 5734  
Germany 0800 1005759  
Italy 00800 0225 5734  
Spain 00800 0225 5734  
United Kingdom 00800 0225 5734  
USA & Canada 1 800 228 5166  
www.sdi.com.au

EC REP

SDI Germany GmbH  
Hansesstrasse 85  
51149 Cologne  
Germany  
T+49 2203 9255 0

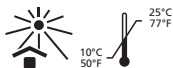

Last Revised: 07 2022

# SDI AURA BULK FILL

ULTRA UNIVERSAL  
RESTORATIVE MATERIAL  
INSTRUCTIONS FOR USE

ENGLISH

## INTRODUCTION

**aura bulk fill** is a light cured, radiopaque, high strength, composite designed to eliminate time consuming layering for posterior restoration. The **aura bulk fill** has a 5mm depth of cure allowing fast and easy placement when restoring deep cavities.

## INDICATIONS

- Posterior restorations
- Core buildup
- Splinting
- Sandwich technique with glass-ionomer

## CONTRA-INDICATIONS

- Pulp capping.
- Do not use in conjunction with any eugenol containing materials.
- Anyone with allergy to acrylics

## PLACEMENT PROCEDURE:

1. Isolate tooth.
2. Prepare cavity using standard technique for composite resin restorations.  
**Note:** In cases where pulp protection is necessary, use a calcium hydroxide liner.
3. Apply a dentin/enamel bonding agent such as SDI Go! as per manufacturer's instructions.
4. Place **aura bulk fill** no more than 5mm thick.
5. Light cure for 20 seconds using a high powered LED curing light (460 - 480nm wavelength).
6. Finish restoration using standard technique.

## STORAGE AND HANDLING

- Store at temperatures between 10° and 25°C (50°-77°F).
- Use at room temperature between 20° and 25°C (68° - 77°F).
- Syringe system: when not in use replace the cap tightly.

## PRECAUTIONS

- Avoid prolonged contact of **aura bulk fill** with the skin or oral tissue, as it may cause inflammation of the oral tissues or skin sensitization.
- For professional use only.
- Keep out of reach of children.
- Do not take internally.
- Do not use after expiry date.
- Do not expose material to direct light.
- Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
- SDS available at [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) or contact your regional representative.

## FIRST AID

- **Eye (contact):** Wash thoroughly with water and seek medical attention.
- **Skin (contact):** Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol. Wash thoroughly with water.
- **Ingestion:** Rinse mouth thoroughly. Drink plenty of water/milk. Seek medical attention if symptoms persist.
- **Inhalation:** No symptoms expected.

# SDI AURA BULK FILL

MATERIAL RESTAURADOR  
ULTRA UNIVERSAL  
INSTRUÇÕES DE USO

PORTUGUÊS

## INTRODUÇÃO

**aura bulk fill** é uma resina composta fotopolimerizável, radiopaca, de alta resistência, indicada para restaurações em grandes incrementos. A **aura bulk fill** permite que o profissional utilize incrementos numa profundidade de até 5 mm, garantindo uma inserção fácil e rápida em cavidades profundas. A **aura bulk fill** foi desenvolvida para agilizar e facilitar a confecção de restaurações posteriores.

## INDICAÇÕES

- Restaurações posteriores.
- Construção de Núcleo.
- Espiintagem.
- Técnica sanduíche com ionômero de vidro.

## CONTRA-INDICAÇÕES

- Capejamento pulpar
- Não utilizar em conjunto com quaisquer materiais contendo eugenol
- Não utilize o produto em pacientes alérgicos a acrílicos ou a alguma outra substância presente na composição

## PROCEDIMENTO:--

1. Isole o dente.
2. Prepare a cavidade utilizando a técnica padrão para restauração de resina composta.  
**Nota:** Em casos onde é necessário a proteção da polpa, use um forramento de hidróxido de cálcio.
3. Aplique o sistema adesivo na dentina/esmalte, sugestão, Zipbond (adesivo universal). A **aura bulk fill** é compatível com todas as técnicas adesivas. Usar o adesivo escolhido de acordo com as instruções do fabricante.
4. Aplique o produto na cavidade em incrementos de até 5mm de profundidade.
5. Fotopolimerize o incremento durante 20 segundos (fotopolimerizador LED de alta potência - comprimento de onda de 460 - 480 nm).
6. Finalize a restauração usando a técnica padrão.

## ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

- Armazenar em temperaturas entre 10°e 25°C (50°-77°F).
- Usar em temperatura ambiente entre 20°e 25°C (68°-77°F).
- Sistema de seringa: Quando não estiver em uso, recolocar a tampa e feche a seringa.

## PRECAUÇÕES

- Evitar o contato prolongado da **aura bulk fill** com o tecido oral e com a pele do paciente, pois, pode causar inflamação dos tecidos orais ou sensibilidade na pele.
- Apenas para uso profissional.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não ingerir.
- Não usar depois da data de validade.
- Não expor o material à luz direta.
- Atenção: As leis federais limitam a venda deste produto apenas para dentistas.
- SDS disponível em [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ou contate seu representante regional.

## PRIMEIROS-SOCORROS

- **Olhos (contato):** Lavar com água abundante e procurar assistência médica.
- **Pele (contato):** Remover utilizando um pano ou esponja embebido em álcool. Lavar com água abundante.
- **Ingestão:** Lavar a boca com água abundante. Beber bastante água/leite. Procurar um médico se os sintomas persistirem.
- **Inalação:** Não são esperados sintomas.

## Detentor da Notificação:

SDI Holdings Pty Ltd Do Brasil  
CNPJ: 42.649.953/0001-25  
Av Doutor Reinaldo Schmithausen, nº 3141,  
Cordeiros, Itajaí - SC - CEP: 88310-004

Avnia nº : 82375629027